


*Therapiesicherheit /  
Therapy safety  
by...*

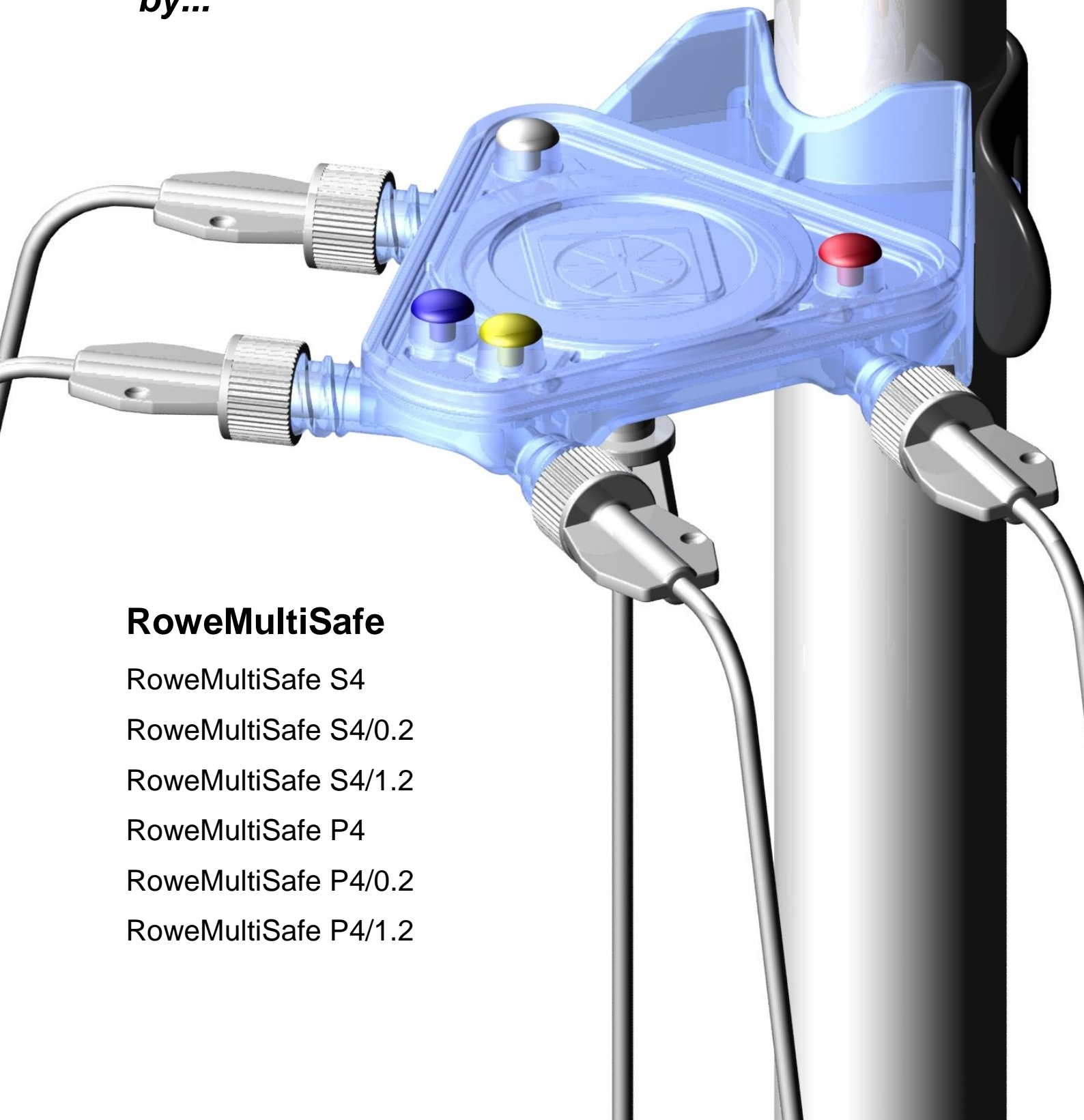

**RoweMultiSafe**

- RoweMultiSafe S4
- RoweMultiSafe S4/0.2
- RoweMultiSafe S4/1.2
- RoweMultiSafe P4
- RoweMultiSafe P4/0.2
- RoweMultiSafe P4/1.2

# Produktinnovation

Infusionsfiltersystem für  
das Fluidmanagement

# Product innovation

Infusion system for  
fluid management

## RoweMultiSafe S

Partikelfilter /  
Particle filter


Entlüftungsfiter /  
Air venting filter

Farblich codierte Zufüsse /  
Color coded inflows

Abfluss /  
Outflow

Stativ-  
Bettbefestigungs-  
Vorrichtung /  
Stand or bed  
fastener


Druckgeregeltes  
Sicherheitsrückschlagventil /  
Pressure controlled Check  
safety valve

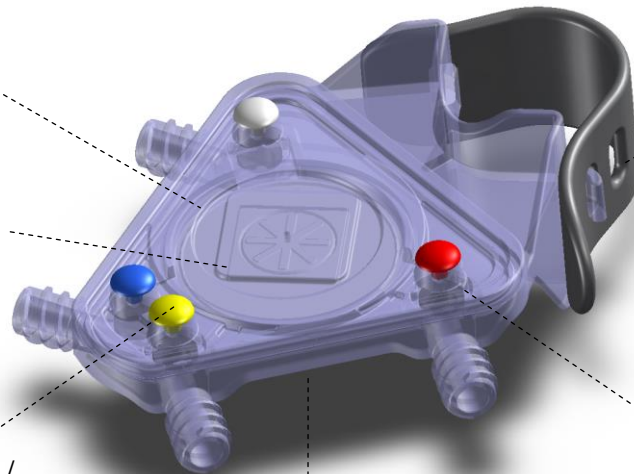

**Sicherheits- – Infusionsfiltersystem zum Zusammenführen, Filtrieren und sicheren Verabreichen von Infusionslösungen mit besonders großer Filterfläche für elektrische Pumpen**

**Safe infusion filter system to collect, filter and apply infusion solutions with a large filter area for electrical pumps**

- Hohe Sicherheit durch das druckgeregelte Sicherheitsrückschlagventil, Bakterien- und Partikelfilter, sowie die verwechslungsfreie Farbkodierung
  - Keine Fehlbedienung durch falsche Hahnpositionierung
  - Vollverschweißtes Gehäuse – flüssigkeits-, luft- und bakterien dicht, dadurch keine Undichtigkeit und kein Einwachsen von Keimen durch Mikrospalte
  - Zentrale Kontrollposition aller Funktionselemente
  - Direkte Befestigung am Stativ
  - Einfaches Handling sowie Kosten- und Zeitersparnis durch eine hohe Produktintegration
  - Inertes, ökologisch vorteilhaftes Gehäusematerial
  - Minimierung des Herstellungs-, Lager- und Entsorgungsaufwands
- *High safety due to the pressure controlled check safety valve, bacteria- and particle - filter as well as the unmistakable color coding*
  - *No faulty operation according of wrong cock position*
  - *Completely welded housing → no leak and no intrusion of germs through micro cracks*
  - *One controlling center for all functional components*
  - *Integrated stand fastener connection*
  - *Easy handling as well as cost and time saving by high product integration*
  - *Inert and ecologically valuable housing material*
  - *Minimisation of manufacturing, stock and disposal costs*

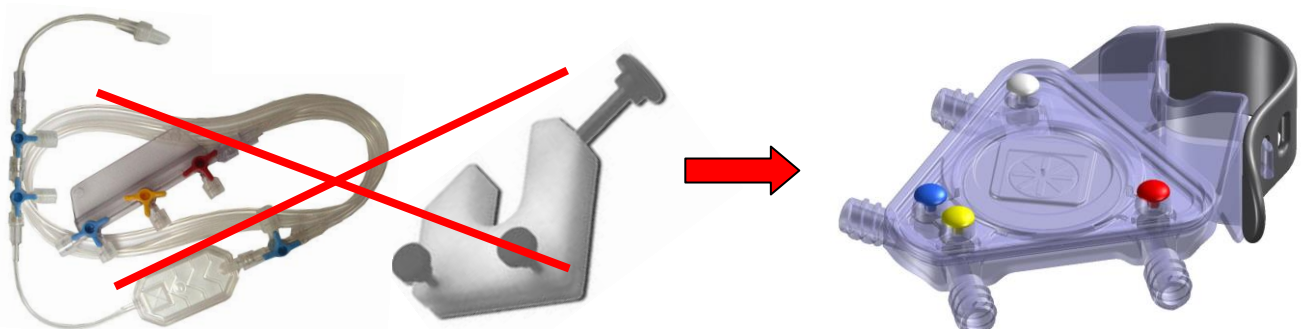

# Produktinnovation

Infusionsfiltersystem für  
das Fluidmanagement

# Product innovation

Infusion system for  
fluid management

## RoweMultiSafe P

Partikelfilter /  
Particle filter


Entlüftungsfiter /  
Air venting filter

Farblich codierte Zuflüsse /  
Color coded inflows

Abfluss /  
Outflow

Stativhalteplatte für  
Standardsysteme /  
Stand fastener plate  
for standard systems

Druckgeregeltes  
Sicherheitsrückschlagventil /  
Pressure controlled Check  
safety valve

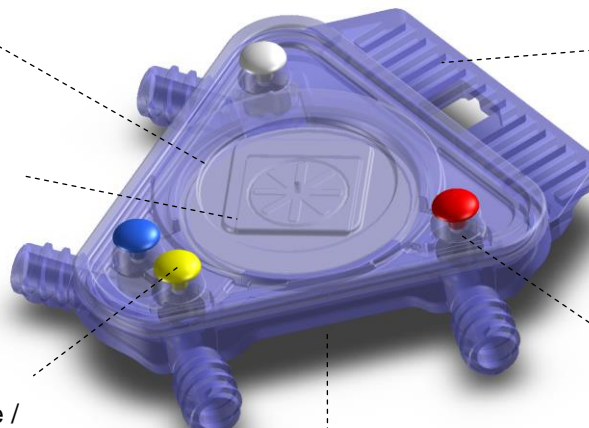

RoweMultiSafe ist in der bewährten RoweMed Filterqualität mit allen gängigen Porengrößen erhältlich  
*RoweMultiSafe is available in all established pore sizes in well known RoweMed filter quality*


Patienten- und Anwendersicher ♦ preisgünstig ♦ zeit- und raumsparend ♦ umweltfreundlich  
*Safety for patient and user ♦ well-priced ♦ time- and space-saving ♦ eco-friendly*

## Infusionsleitung / Infusion line



PUR-Leitung 200 cm  
PUR-line 200 cm

(Infusionsleitung PUR 200cm / 3-Wegehahn (Ø 1,5x2,7)  
(infusion line PUR 200 cm / 3-way stop cock (Ø 1.5x2.7)

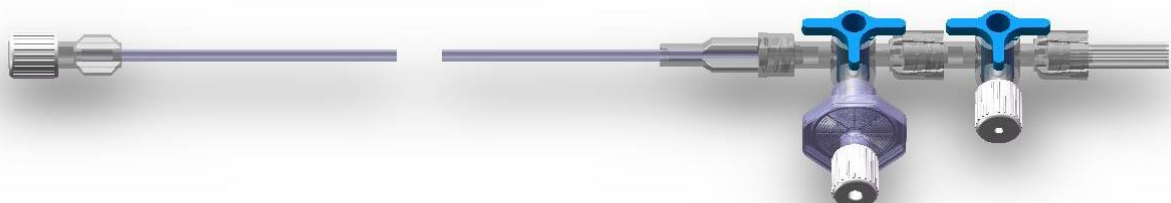

PUR-Leitung 200 cm 2A

(Infusionsleitung PUR 200cm / 1 x 3 Wegehahn mit Zusatzanschluss  
RowePhil 18 / 1 x 3-Wegehahn (Ø 1,5x2,7)

PUR-line 200 cm 2A

(infusion line PUR 200 cm / 1 x 3-way stopcock with additional connection  
RowePhil 18 / 1 x 3-way stop cock (Ø 1.5x2.7)



**Produktvarianten / Product types:**

<b>RoweMultiSafe</b>	<b>Artikel Nr. Article no.</b>
<b>Ohne Filter / Without filter</b>	
RoweMultiSafe P4 PUR-Leitung 200 cm <i>RoweMultiSafe P4 PUR-line 200 cm</i>	A-2403
RoweMultiSafe S4 PUR-Leitung 200 cm <i>RoweMultiSafe S4 PUR-line 200 cm</i>	A-2402
RoweMultiSafe P4 PUR-Leitung 200 cm 2A <i>RoweMultiSafe P4 PUR-line 200 cm 2A</i>	A-2414
RoweMultiSafe S4 PUR-Leitung 200 cm 2A <i>RoweMultiSafe S4 PUR-line 200 cm 2A</i>	A-2413
<b>0,2 µm Nylon pos. Filter / 0,2 µm nylon pos. filter</b>	
RoweMultiSafe P4/0.2 0,2µm Nylon pos. PUR-Leitung 200 cm <i>RoweMultiSafe P4/0.2 0.2µm nylon pos. PUR-line 200 cm</i>	A-2401
RoweMultiSafe S4/0.2 0,2µm Nylon pos. PUR-Leitung 200 cm <i>RoweMultiSafe S4/0.2 0.2µm nylon pos. PUR-line 200 cm</i>	A-2400
RoweMultiSafe P4/0.2 0,2 µm Nylon pos. PUR-Leitung 200 cm 2A <i>RoweMultiSafe P4/0.2 0.2 µm Nylon pos. PUR-line 200 cm 2A</i>	A-2412
RoweMultiSafe S4/0.2 0,2 µm Nylon pos. PUR-Leitung 200 cm 2A <i>RoweMultiSafe S4/0.2 0.2 µm Nylon pos. PUR- 200 cm 2A</i>	A-2411
<b>1,2 µm Nylon pos. Filter / 1,2 µm nylon pos. filter</b>	
RoweMultiSafe P4/1.2 1,2 µm PET PUR-Leitung 200 cm <i>RoweMultiSafe P4/1.2 1.2 µm PET PUR-line 200 cm</i>	A-2420
RoweMultiSafe S4/1.2 1,2 µm PET PUR-Leitung 200 cm <i>RoweMultiSafe S4/1.2 1.2 µm PET PUR-line 200 cm</i>	A-2419
RoweMultiSafe P4/1.2 1,2 µm PET PUR-Leitung 200 cm 2A <i>RoweMultiSafe P4/1.2 1.2 µm PET PUR-line 200 cm 2A</i>	A-2422
RoweMultiSafe S4/1.2 1,2 µm PET PUR-Leitung 200cm 2A <i>RoweMultiSafe S4/1.2 1.2 µm PET PUR-line 200 cm 2A</i>	A-2421
<b>Infusionsleitungen / infusion lines</b>	
RoweMultiSafe Infusionsleitung PUR 200 cm (Ø1,5x2,7) <i>RoweMultiSafe infusion line PUR 200 cm (Ø1.5x2.7)</i>	A-2415
RoweMultiSafe Infusionsleitung PUR 200 cm 2A (Ø1,5x2,7) <i>RoweMultiSafe infusion line PUR 200 cm 2A (Ø1.5x2.7)</i>	A-2416